



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

MASSAGEADOR SHIATSU MASSAGE BED

RM-ES1700A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

APRESENTAÇÃO	2
1. CUIDADOS	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	3
4. DETALHES DO PRODUTO.....	5
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
6. TERMOS DE GARANTIA.....	6

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e

qualificados, para evitar assim situações de risco;

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

IMPORTANTE:

- **Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.**
- **Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.**
- **Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).**
- **Somente para uso adulto.**
- **Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:**
 - **Com marca-passo**
 - **Gestante**
 - **Flebite**
 - **Trombose**
 - **Doenças cardíacas**
 - **ou desconforto.**
- **Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.**
- **O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.**

Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) Antes do Uso

1. Antes de utilizar, siga as instruções de como remover o parafuso na parte traseira.
2. Coloque a esteira no chão, sofá ou cama.
3. Conecte o adaptador a tomada.

B) Sugestão de Uso


1. Ligue a esteira pressionando o botão “Power” (liga/desliga).
2. Escolha entre as 3 opções de massagem (Shiatsu, Rolamento e Vibração) pressionando o botão correspondente, a luz led indicadora da localização acenderá. Para sair do programa aperte novamente o botão ou selecione outro botão.
3. Para desligar, pressione o botão “Power” (liga/desliga) novamente.

C) Como guardar

Recolha, dobre e prenda o cabo de força, acondicionando no bolso na parte de trás da capa. Guarde o controle no bolso lateral da capa. Guarde o travesseiro no bolso maior na parte de trás da capa. Use a função portátil para guardar sua esteira em um local seco, seguro e livre de umidade. Evite o contato de objetos afiados e pontiagudos que possam cortar ou furar a estrutura protetora. Evite dobrar ou enrolar o cabo de força ao redor da esteira. Não puxe o equipamento pelo cabo de força.



4. DETALHES DO PRODUTO

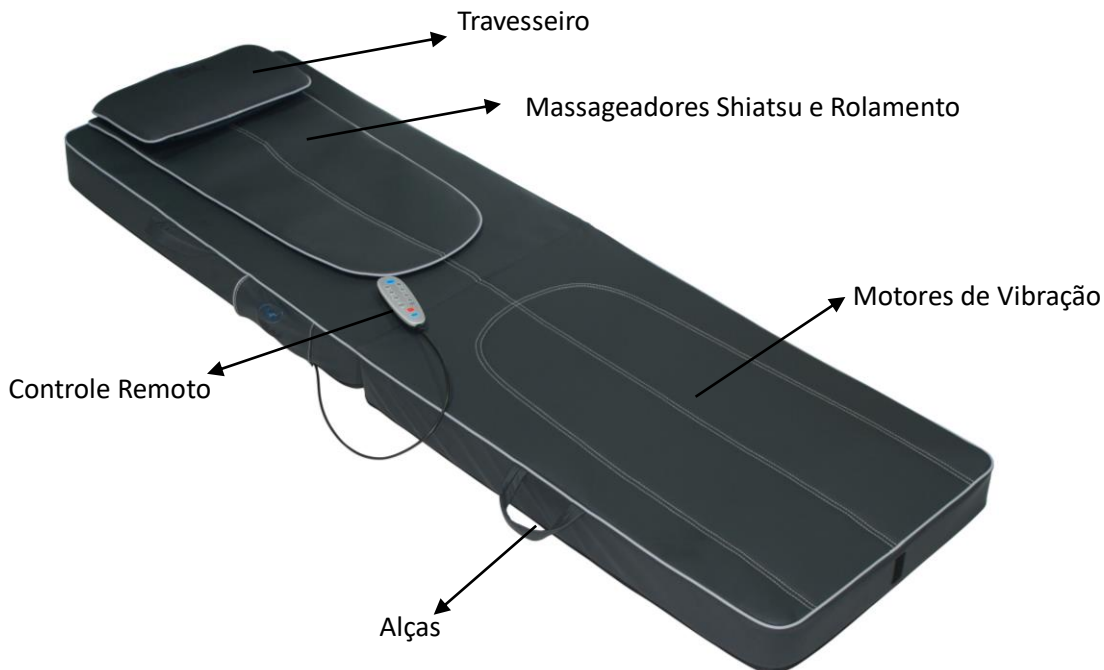

- 1 – Power** (Liga/Desliga)
- 2 – Aquecimento:** as duas cabeças de massageadores tem a função de aquecimento. Quer servem tanto para a massagem de shiatsu quanto de rolamento.
- 3- Ajuste Vertical:** Enquanto a unidade faz a massagem Shiatsu você pode selecionar a função “Ajuste Vertical” para concentrar a ação da massagem em determinada área de sua coluna. Uma vez que a função de massagem localizada estiver ativa você pode ajustar o mecanismo subindo ou descendo até a posição desejada. As setas indicam a direção e sentido do movimento. Uma vez que você solte o botão, o mecanismo vai permanecer no local.
- 4 – Ajuste Lateral:** Enquanto o aparelho estiver fazendo a função de massagem rolamento. Você pode pressionar e ajustar a distância entre os rolamentos.
- 5/6/7- Abaixo, Acima e Coluna Inteira:** Faz com que os mecanismos fiquem posicionados de acordo com sua escolha.
- 8 – Vibração:** Ativa a vibração na parte inferior.
- 9 – Rolamento:** Ativa a função rolamento.
- 10 – Shiatsu:** Ativa função shiatsu.
- 11- Demo:** Pressione para ativar a função de demonstração.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 51 x 22 x 82 cm
Peso: 8,58 kg
Frequência: 60Hz
Voltagem: 127V/220 V (bivolt)
Garantia: 1 ano

6. TERMOS DE GARANTIA

Estrutura:

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

Revestimento:

Os revestimentos usados nos estofados tem garantia de **90 dias**, em relação a: esgaçamento da costura, desfiados não causados por mau uso e desbotamento natural.

Esta garantia não abrange:

Enfraquecimento normal das fibras, causados pelo uso do produto; Achatamento; Pilling (bolinhas); Diferenças de tonalidade do revestimento entre as partes do produto, detectadas após a entrega; possíveis deformações ocasionadas pela lavagem do estofado e danos causados pelas impermeabilizações. Não esqueça: veludos e tipos aveludados (Suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.

Espumas:

A garantia para espumas é de **90 dias** em relação à perda de resistência. É importante saber que com o uso do estofado e o passar do tempo, é normal as espumas sofrerem uma pequena deformação.

Não esqueça: o amaciamento dos assentos e das almofadas são conseqüências naturais da utilização do produto. Algumas deformações são perfeitamente normais, não podendo ser confundidas com defeitos.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688