



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

SHIATSU PILLOW

RM-ES3838A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sumário

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	3
4. DESCRIÇÃO DO APARELHO	4
5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	5
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
7. TERMOS DE GARANTIA.....	5

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados da podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
 - Com marca-passo
 - Gestante
 - Flebite
 - Trombose
 - Doenças cardíacas
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) Sugestão de Uso – No carro

1. Coloque o massageador sobre o banco do carro.
2. Conecte o plugue de baixa tensão do adaptador 12 V para carro na entrada de alimentação do assento.

3. Conecte o adaptador 12 V para carro no acendedor de cigarros.

B) Sugestão de Uso – Poltrona ou sofá

1. Coloque o assento massageador sobre uma poltrona ou cadeira adequada.
2. Conecte o plugue de baixa tensão da fonte de alimentação na entrada de alimentação do assento massageador.
3. Conecte o plugue da fonte de alimentação na tomada.


C) Funções do Aparelho


- Pressione o massageador suavemente na parte do corpo que você deseja massagear.
- 2. Certifique-se de que você se encontra em uma posição confortável antes de deslocar gradualmente o seu peso sobre o massageador.
- Ligue o massageador pressionando o botão On/Off (liga/desliga). Os mecanismos massageadores começarão a girar.
- Para ativar a função aquecimento pressione o botão com formato em “ondas”. Para desligar pressione novamente.
- Para desligar o massageador pressione o botão On/Off (liga/desliga).
- Pressione o botão On/Off (liga/desliga) por 2 segundos para desligar o aparelho.

NOTA: Não use o massageador por mais do que 15 minutos. Usar o aparelho por mais tempo pode sobrecarregar os músculos e tencioná-los em vez de relaxá-los.

4. DESCRIÇÃO DO APARELHO

Encosto Massageador Shiatsu Comfort (frente)

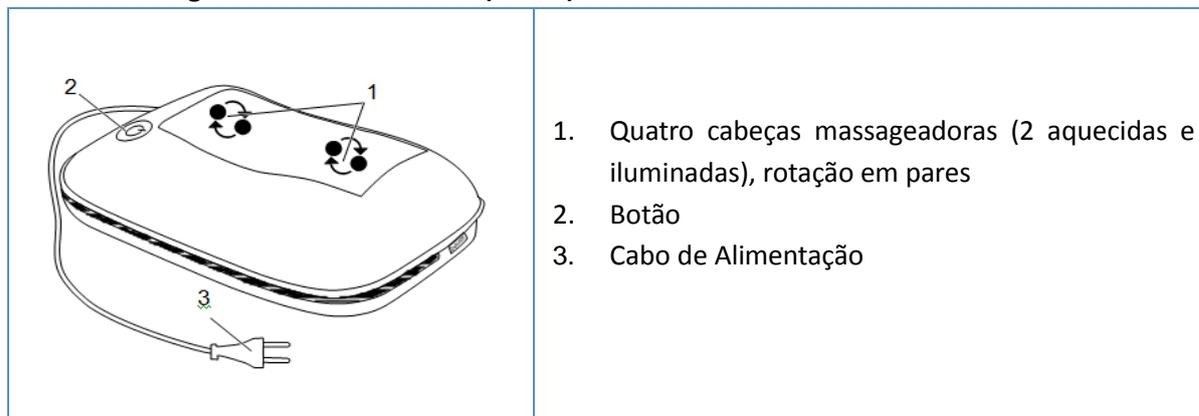

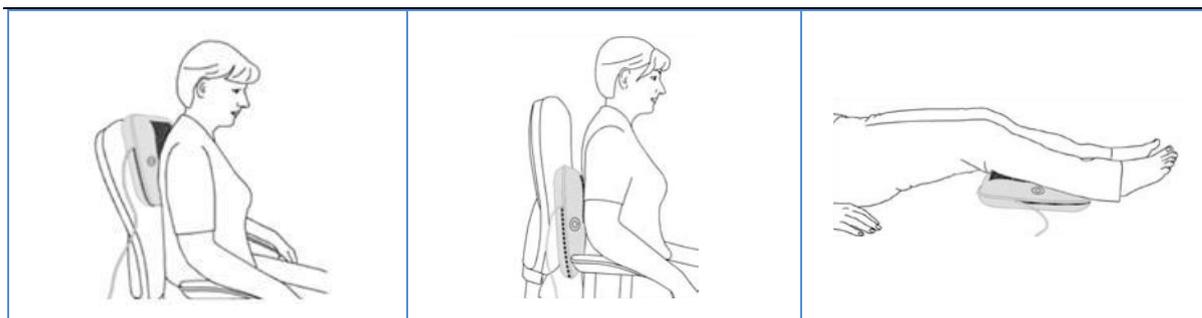

Massagem nas costas:
parte superior das costas

Massagem nas costas:
Região da lombar

Massagem nas
Pernas

Entrada de Alimentação para Uso - Carro:



5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Cabeças massageadoras girando em baixa velocidade.	A carga nas cabeças massageadoras é muito forte.	Reduza a pressão de contato sobre as cabeças.
As cabeças massageadoras não se movem.	Aparelho não conectado à fonte de alimentação.	Conecte o cabo de alimentação na tomada e ligue o aparelho.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltagem: bivolt

Potência: 12 W

Dimensões: 21 x 11 x 32 cm

Peso: 1,4 kg

7. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688