



# Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## IRRIGADOR ORAL SEM FIO JET CLEAN

RM-IO0006A



### MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

## Índice

1. CUIDADOS .....	3
2. LIMPEZA.....	5
3. MODO DE USAR.....	6
4. DETALHES DO PRODUTO.....	10
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	11
6. TERMOS DE GARANTIA.....	12

---

## **Apresentação:**

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Obrigado por escolher o IRRIGADOR ORAL SEM FIO JET CLEAN. Este irrigador é portátil e funcional. Remove a placa bacteriana e os alimentos entre os dentes e abaixo da linha da gengiva. Apresenta três modos de pressão de água e modo pulso. Conta com um reservatório para até 300 ml de água e vem com 5 bicos para uso.

- Durável: longo tempo de uso contínuo
- Portátil: leve para onde quiser!
- À prova d'água
- 5 intensidades de pressão
- Proteção de água IPX7
- Pressão de água de 40 a 110psi
- Carregamento de bateria de 3 a 5 horas

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

## **1. CUIDADOS**

Antes de usar o produto, as seguintes precauções básicas devem sempre ser seguidas:

- Encha o reservatório apenas com água.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Este produto não pode ser usado por crianças e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento.

### **ATENÇÃO! RISCO DE EXPLOSÃO DA BATERIA!**

- Nunca exponha a altas temperaturas;
- Verifique se a tensão doméstica corresponde à especificação nominal do aparelho;
- Não manuseie o plugue com as mãos molhadas;
- Cuidado para que o adaptador de energia não caia na água;

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não toquem no aparelho;
- Não modifique o produto sob nenhuma circunstância;
- Não use este dispositivo se alguma peça estiver danificada;
- Somente técnicos qualificados devem executar reparos;
- Não use se você tiver uma ferida aberta na língua ou na boca;
- Não use com nenhum outro propósito além da limpeza oral;
- Não use este produto ao ar livre ou opere onde produtos em aerosol (spray) estejam sendo usados ou onde esteja sendo administrado oxigênio;
- Não direcione a água para o nariz e o ouvido. Este produto é capaz de produzir pressões que podem causar sérios danos nessas áreas;
- Não encha o reservatório com água com temperatura acima de 40°C;
- Não use iodo, água sanitária ou óleos essenciais concentrados insolúveis em água neste produto. O uso destes pode reduzir o desempenho do produto e reduzir a vida útil do produto;
- Remova todas as jóias orais antes de usar este produto;
- Não use o produto continuamente, pois isso pode prejudicar o desempenho do produto;
- Esvazie a água restante do reservatório entre os usos. Drene o dispositivo operando por 3 segundos com um reservatório vazio;
- Desconecte o cabo de carregamento ao limpar o dispositivo;
- Nunca ligue o produto antes de colocar o bico na sua boca;
- Nunca pressione o bico com muita força contra seus dentes ou gengivas;
- Nunca use este produto para limpar outras partes do corpo tais como orelhas ou olhos;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o produto sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

## **MANUTENÇÃO**

Certifique-se de jogar fora a água de dentro do tanque e deixe o aparelho funcionar por 2 a 3 segundos para drenar a água após o uso. Caso contrário, bactérias podem se acumular na água restante. Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido, quando necessário, realize a limpeza com um pano macio e um limpador não abrasivo suave. O reservatório pode ser lavado com água e sabão. Lave a sujeira de dentro com uma escova ou similar e limpe com um pano. Seque o reservatório quando não for usar por um longo período.

**IMPORTANTE:**

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
  - Gengivite
  - Implantes Dentários
  - Herpes
  - Aftas
  - Mucocele
  - Inflamação bucal
  - Desconforto
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

## **2. LIMPEZA**

### **Bocal**

Enxágue com água e seque com um pano macio.

### **Corpo do dispositivo principal**

Limpe a superfície com um pano de limpeza e seque.

Não use diluidor, gasolina e álcool.

Não limpe com água com temperatura acima de 40 ° C.

### **Reservatório e mangueira de sucção**

Desconecte o reservatório deslizando-o para baixo e abra a tampa. Limpe a sujeira da tampa e remova a sujeira no reservatório com água morna e deixe secar antes de substituir. Limpe a mangueira de sucção com água e seque. Não puxe e torça a mangueira.

## Antes de usar

Se o dispositivo for novo ou não for utilizado por um longo período de tempo, poderá não ejetar água devido a uma válvula presa. Nesse caso, simplesmente:

- 1- Remova o bico, se estiver instalado.
- 2- Lave o suporte do bico com água por 5 a 10 segundos.
- 3- Reinsira o bico e continue a operação.


## 3. MODO DE USAR

### Instruções de operação

Insira o bico no orifício na parte superior da alça do irrigador oral até ouvir um clique. Para remover, pressione o botão de liberação do bico e puxe-o para fora.

### Enchimento do Reservatório

Levante a tampa do reservatório e encha o reservatório com água.

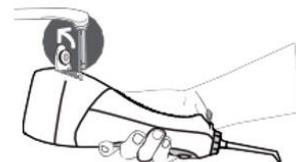

### Inserindo e Removendo as Pontas

Insira a ponta no centro do botão na parte superior do dispositivo. Pressione firmemente até que a ponta se encaixe no lugar. Para remover a ponta do corpo do dispositivo, pressione o botão de ejeção da ponta e puxe a ponta do controle.

**CUIDADO: Não pressione o botão de ejeção da ponta enquanto o dispositivo estiver funcionando.**

### Modo de pressão

O irrigador oral possui 5 intensidades de pressão:

- Super Forte
- Forte
- Médio
- Baixo
- Suave

Recomenda-se iniciar a aplicação primeiro com o modo de baixa pressão e aumentá-lo gradualmente.

## Ajustando a configuração de pressão

Você pode ajustar a configuração de pressão de água pressionando o botão de modo no dispositivo. Comece com a configuração mais baixa e aumente conforme sua preferência.



## Quando Finalizado

Desligue o dispositivo. Esvazie todo o líquido restante no reservatório.

## Diretrizes para aplicação oral


É possível que algum sangramento menor da gengiva ocorra com gengivas saudáveis durante as primeiras 1-2 semanas de aplicação devido a áreas periodontais sensíveis. Periodontia ou outro distúrbio pode ser indicado se o sangramento continuar após 2 semanas de uso. Neste caso, pare de usar o dispositivo e consulte um dentista. Se o seu médico o aconselhou a receber pré-medicação com antibióticos antes dos procedimentos odontológicos, consulte seu dentista antes de usar este instrumento.

## MODO DE USO:



### Ponta a Jato

Guie o jato para os dentes e gengivas, deslize o botão da alça para cima para iniciar o fluxo de água. Mantenha a boca ligeiramente aberta para permitir que a água escorra para a pia. Direcione o jato de água em direção à linha da gengiva a 90 graus, de modo que o contato seja feito onde o dente e a gengiva se encontram. Conduza o fluxo de água de dente em dente, lembrando-se de fazer uma breve pausa entre cada dente.

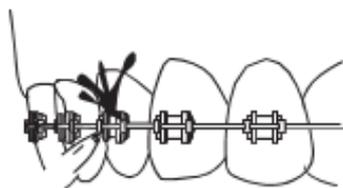

### Ponta Periodontal

Coloque a ponta periodontal em contato entre os dentes e a linha gengival. Encoste a ponta macia em um dente em um ângulo de 45 graus e coloque delicadamente a ponta sob a linha da gengiva. Inicie o irrigador ajustando-o na pressão mais baixa e limpe seguindo suavemente a linha da gengiva, inserindo a ponta periodontal entre os dentes. Continue traçando ao longo da linha gengival para massagear as gengivas e aplicar a solução com segurança nas bolsas gengivais abaixo da linha gengival.



### Ponta Ortodôntica

Use a ponta ortodôntica para escovar e enxaguar simultaneamente áreas difíceis de alcançar em torno de aparelhos, coroas, pontes e implantes. Comece no último molar (dente posterior). Coloque a ponta em um ângulo de 90 graus em relação ao dente na linha da


gengiva. Deslize suavemente a ponta ao longo da linha da gengiva, parando brevemente para escovar levemente a área entre o dente e todo o suporte ortodôntico, antes de prosseguir para o próximo dente e fora dos dentes superiores e inferiores. Continue o processo até limpar o interior.



### Ponta Limpadora de Língua

Incline sua cabeça sobre a pia. Deslize o botão de pressão para a configuração mais baixa. Ligue o irrigador e coloque o limpador de língua na parte de trás de sua língua e mova-o para frente para limpar sua língua. Repita para cobrir toda a língua. Ajuste a pressão para a configuração mais baixa e ajuste para uma configuração de hinger para mais pressão de água conforme for confortável.

### Carregamento no Primeiro Uso

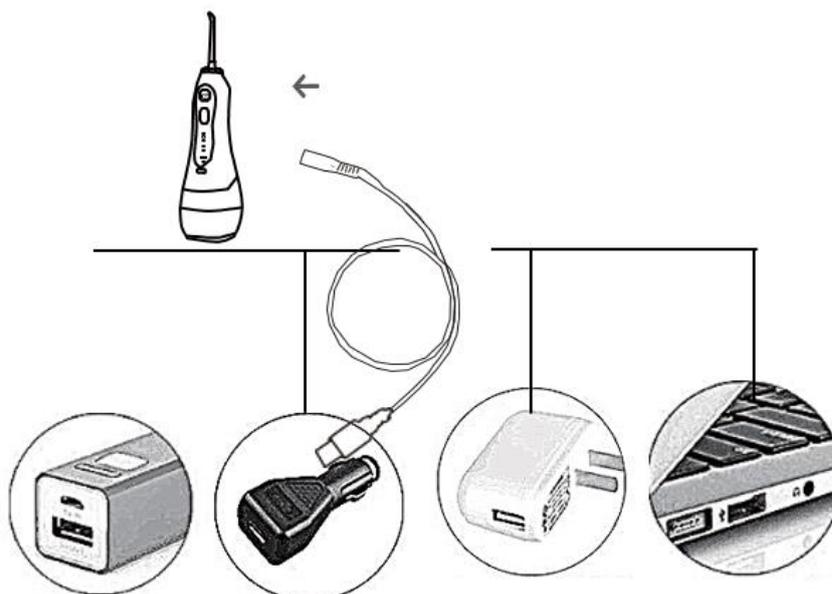

Este produto não vem com carregador AC / DC. A unidade é carregada por meio de dispositivos com recursos de alimentação USB de 5 V, como telefone celular, laptop, carregador de parede com alimentação USB, etc. O indicador de carga do aparelho piscará durante o carregamento e permanecerá ligado continuamente quando estiver totalmente carregado. Uma recarga completa levará de 3 a 5 horas.

**Solução de Problemas**


<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Ação Corretiva</b>
Vazamento do Reservatório	O anel de vedação está incorreto	Remova o anel e reinstale novamente
Baixa Pressão de água	Bateria baixa	Recarregue o dispositivo
	Bocal bloqueado	Substitua por um novo bocal
Duração de apenas alguns minutos com a carga completa	Sem bateria	Carregue o Irrigador
	Cabo de Carga	Tente com um novo cabo de carga
	Adaptador quebrado	Experimente com um novo adaptador
Água não sai mesmo com o motor fazendo barulho	Bocal bloqueado	Verifique a saída da água da ponteira
	Válvula de Sucção deslocada	Mantenha o dispositivo ligado, encha com água até o orifício onde a cabeça do bico encaixa.
Motor não faz barulho	Bateria baixa	Ative a bateria recarregando-a por 16 horas
Produto é aberto enquanto o aparelho funciona	A proteção contra superaquecimento é ativada (uso contínuo de cinco tanques de água com pressão mais alta)	Reinicie o dispositivo em 2 horas




**Disposição**

A bateria do aparelho contém lítio. No final da vida útil da bateria, recicle a unidade em seu centro de reciclagem. A bateria não é substituível.

## 4.DETALHES O PRODUTO

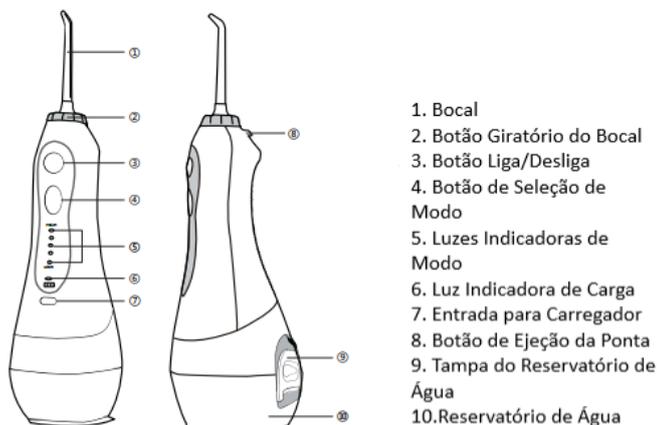

### Acessórios

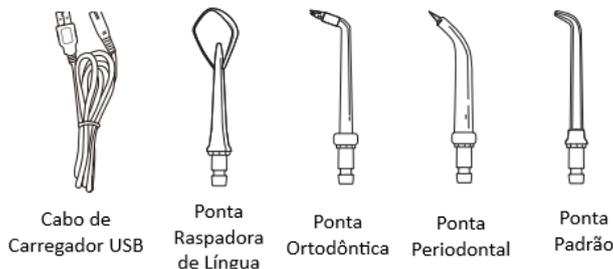

Pode ocorrer abaixo da situação quando usar esta máquina pela primeira vez ou deixá-la sem uso por um longo tempo: A cabeça do bico não pulveriza água imediatamente após ligar a máquina.

Nesse caso, siga as instruções abaixo para que funcione:

Adicione a quantidade adequada de água no local onde as pontas são inseridas. Insira a ponta e pressione o botão liga / desliga para ligar o dispositivo.



O depósito de água pode ser retirado simplesmente puxando-o. Pode ser necessário um pouco de força na primeira vez para removê-lo. Mas depois disso, será muito mais fácil.

---

## **5 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Dimensões: 22,2 x 7,0 x 8,0 cm

Alimentação: USB 5V

Peso: 0,31 kg

Garantia: 1 ano

Capacidade do Reservatório: 300 ml

Pressão da água: 40-110 psi

Classificação à prova d'água: IPX7

### **Características Técnicas de Bateria:**

Tempo de carga, de acordo com o nível selecionado:

- Nível 1: 70 minutos

- Nível 2: 56 minutos

- Nível 3: 38 minutos

- Nível 4: 33 minutos

- Nível 5: 30 minutos

Vida útil da bateria: pode ser usada cerca de 500 vezes (carga e descarga / tempo)

Tempo de carregamento: Levará de 3 a 5 horas

### **Conteúdo do pacote**

1 x Irrigador Oral Portátil

5 x Pontas padrão

1 x Base de carregamento sem fio

1 x Caixa de armazenamento de pontas

1 x Manual do Usuário

## **6. TERMOS DE GARANTIA**

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **2 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para este produto.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688