



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

IRRIGADOR ORAL ACQUA FLOSS

RM-IO3333A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. MODO DE USAR.....	6
3. CARREGAMENTO	8
4. DETALHES DO PRODUTO.....	9
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	9
6. TERMOS DE GARANTIA.....	10

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Obrigado por escolher o IRRIGADOR ORAL ACQUA FLOSS. Este irrigador é versátil, pode ser utilizado em todas as posições, inclusive de cabeça para baixo. Sistema compacto de limpeza bucal, que auxiliam na remoção da placa bacteriana. São 5 acessórios disponíveis: higienizador de língua, ponta periodontal, ponta ortodontal e duas pontas de jato de água. Mantenha em dia a saúde dos seus dentes e gengiva, esteja onde estiver.

- Reservatório 400ml
- 1.200 pulsos por minuto
- 5 acessórios
- Bivolt
- 6 configurações de nível de pressão
- Portátil

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar aparelhos elétricos, especialmente quando crianças estão presentes, sempre devem ser tomadas precauções, incluindo, entre outras, como segue:

LEIA TODAS COMO INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

PERIGO:

Para reduzir o risco de eletrocussão:

Sempre desconecte este produto após o uso. Não manuseie ou carregue com as mãos molhadas.

Verifique periodicamente ou esteja atento quanto aos danos. Não use o produto durante o banho. Não coloque ou guarde onde o produto pode cair ou ser puxado para uma banheira, pia ou vaso sanitário.

Não pegue o produto, caso tenha caído na água. Desconecte-se.

ATENÇÃO:

Nunca manuseie este produto se houver um cabo ou plugue danificado, se não está funcionando corretamente, se cair, danificar ou cair na água. O uso de uma bateria diferente da bateria especial projetada para este aparelho pode causar explosão na bateria.

É necessária uma supervisão quando este produto é usado por crianças ou adultos que precisam de assistência.

Não direcione a água sob a língua, para o ouvido, nariz ou outras áreas delicadas. Este produto é capaz de produzir pressões. Isso pode causar danos nessas áreas. Consulte as instruções de operação para o uso correto.

Use este produto apenas para o uso pretendido, conforme descrito no manual ou conforme recomendado pelo seu dentista.

Não use acessórios não recomendados pelo fabricante. Preencha reservatório com água morna ou outra solução prescrita, conforme recomendado pelo seu dentista.

Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura ou mangueira. Mantenha a base do produto e o cabo afastados de superfícies aquecidas.

Não use enquanto estiver usando jóias orais. Retire antes de usar.

Não use onde sprays de oxigênio ou aerossol estiverem sendo administrados, pode danificar o produto. Se você fez uma cirurgia oral ou periodontal nos últimos 12 meses, entre em contato com o seu dentista antes de usar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.


Cuidados com a bateria

Para carregar, conecte o aparelho a uma tomada elétrica. Certifique-se de colocar o interruptor na posição "OFF" antes de carregar. A unidade não carrega se o interruptor estiver na posição "ON". Uma carga completa levará pelo menos 15 horas. Não desligue as baterias completamente, pois isso pode reduzir a vida útil das baterias e exigirá o carregamento do produto por 15 horas para obter uma carga completa. Caso seja armazenado por um período prolongado, carregue-o por 15 horas antes de armazená-lo.


Nunca guarde o produto por longos períodos, a menos que esteja totalmente carregado.

Descarte da bateria


Este produto é fornecido com uma bateria de níquel-hidreto, que não contém metais pesados perigosos. No final de sua vida útil, recicle o produto no centro de reciclagem aprovado mais próximo ou nos locais de descarte, de acordo com os regulamentos locais.

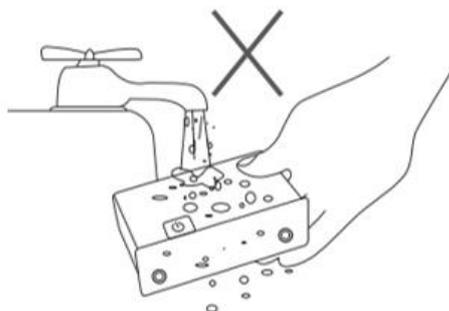


Não lave com água.

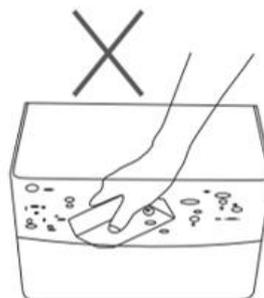

Não mergulhe a base do produto em água ou outro líquido.

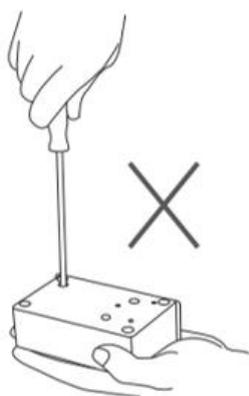

Não desmonte a unidade.

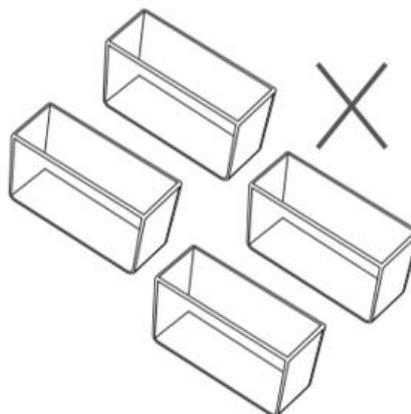


Não use o produto por mais de quatro tanques de água em cada período de duas horas.

IMPORTANTE:


- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
 - Gengivite
 - Implantes Dentários
 - Herpes
 - Aftas
 - Mucocele
 - Inflamação bucal
 - Desconforto
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. MODO DE USAR

1. Insira a base da mangueira de água no orifício na frente da base do produto.

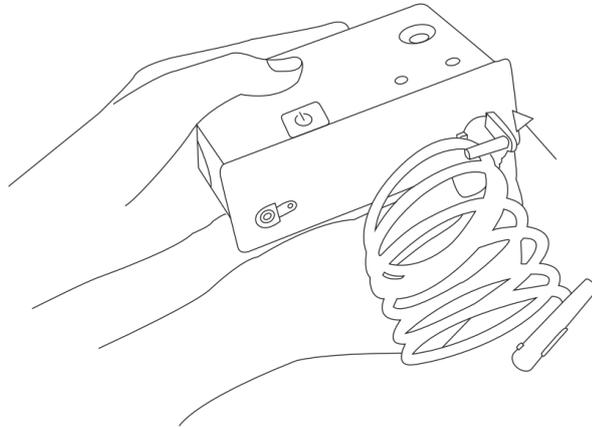


2. Gire a base um quarto de volta para a direita para travar no lugar.

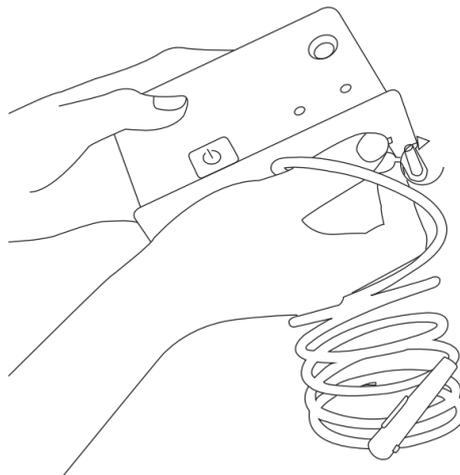


3. Conecte a ponta à alça empurrando com um movimento de torção. Para remover a ponta da alça, pressione o botão de ejeção da ponta e puxe a ponta da alça.




4. Retire o reservatório e encha-o com água morna. Centralize o reservatório sobre a base e empurre a trava no lugar.

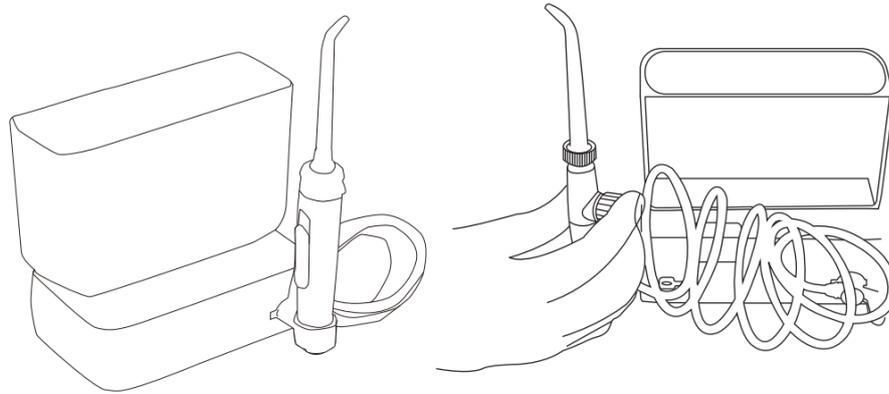

5. Dirija o fluxo girando o botão na parte superior da alça e deslize o botão de controle de pressão para ajustar a pressão da água.

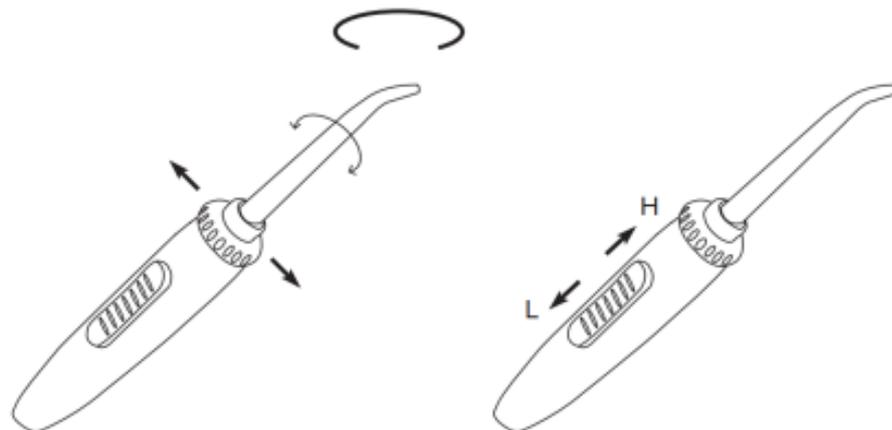


6. Limpe os dentes e gengivas.

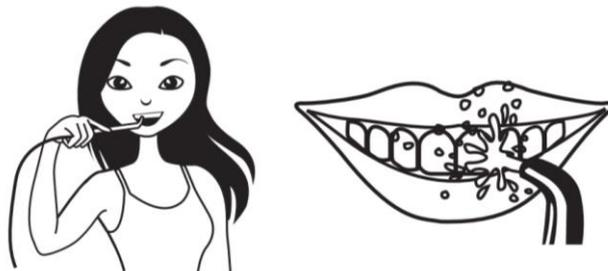


3. CARREGAMENTO


1. Este produto vem com cabo de energia de 5V USB, como telefone celular, lap top, carregador de parede USB.

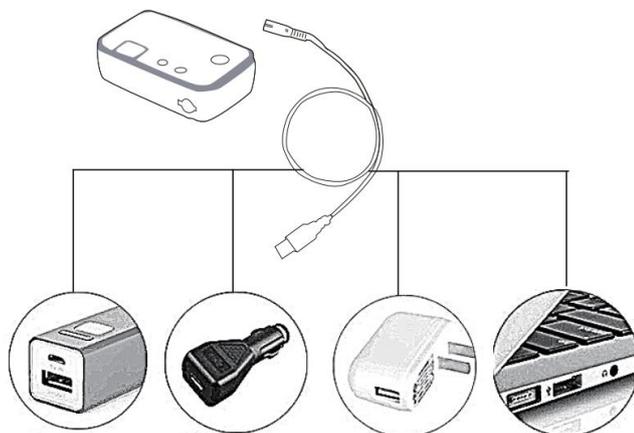


2. Conecte a outra extremidade redonda do carregador ao local de carregamento do lado frontal da base, o LED indica luzes vermelhas piscando.

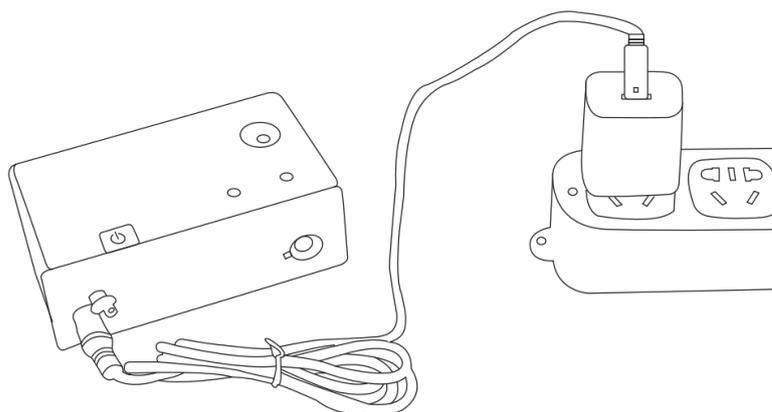

3. Uma carga completa requer 15 horas. Cada carga não deve exceder 20 horas.

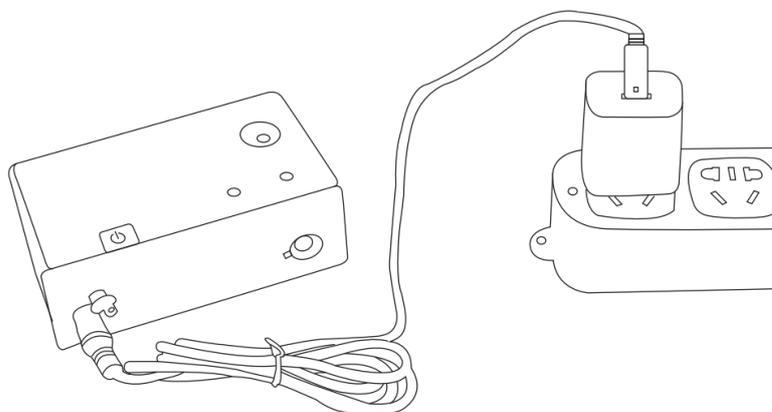

4. DETALHES DO PRODUTO

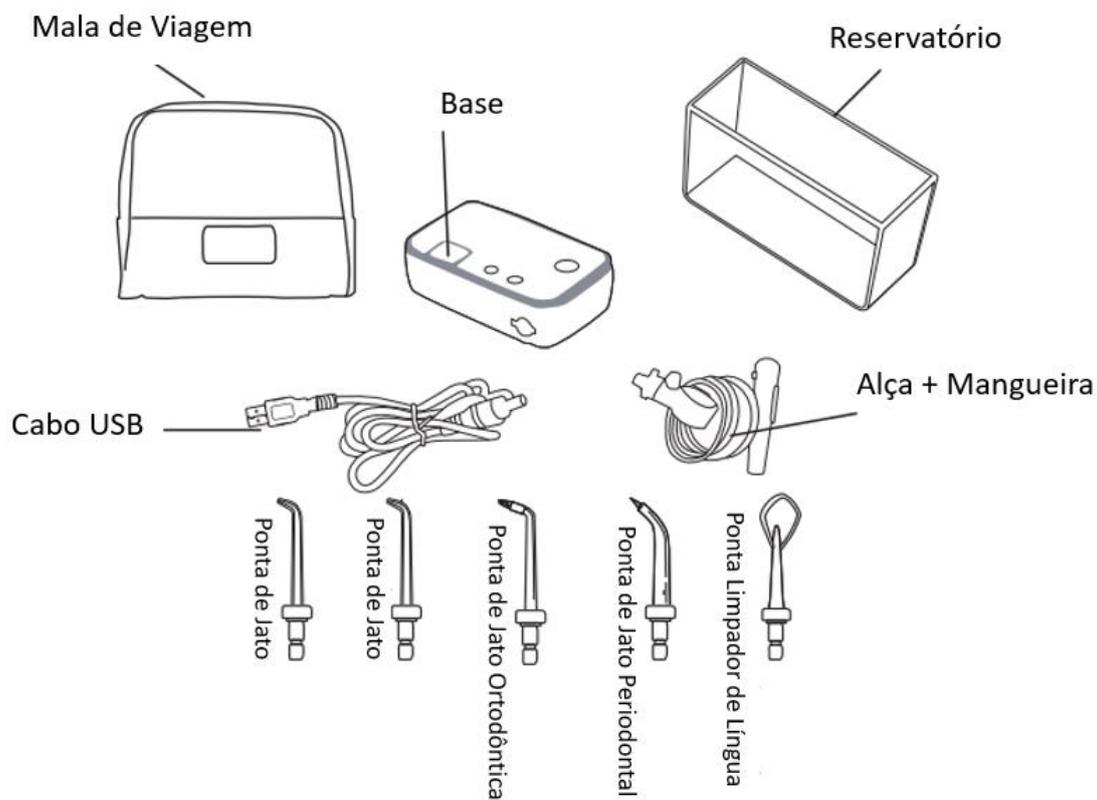

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 12,5 x 4,5 x 8,0 cm

Alimentação: Bivolt (USB)

Pressão da água (psi): 6 níveis: 60-70-80-90-100-110 PSI.

Capacidade do Reservatório: 400ml

Peso: 0,351 kg

Garantia: 1 ano

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688