



# Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## F10 AIR MASSAGE

RM-FM2015A



### MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

## Índice

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	3
4. DETALHES DO PRODUTO.....	7
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	8
6. TERMOS DE GARANTIA.....	8

### **Apresentação:**

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

## **1. CUIDADOS**

A manutenção e os cuidados adequados do produto podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica.
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado;

**IMPORTANTE:**

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
  - Com marca-passo
  - Flebite
  - Trombose
  - Doenças cardíacas
  - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

## **2. LIMPEZA**

Antes de efetuar a limpeza do seu massagador, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano seco para a limpeza. Na parte interna plastificada, use um pano úmido.


## **3. MODO DE USAR**

O massagador pode ser utilizado conectado na tomada ou com pilhas.

a) Instalação das pilhas


Abra o compartimento na parte inferior do controle remoto e coloque as pilhas (4 pilhas AA). Verifique se polaridade das pilhas estão corretas, conforme a imagem abaixo. Após colocar as pilhas, feche o compartimento.

Quando o indicador de tempo do controle começar a piscar, indica que as pilhas estão fracas e precisam ser trocadas.

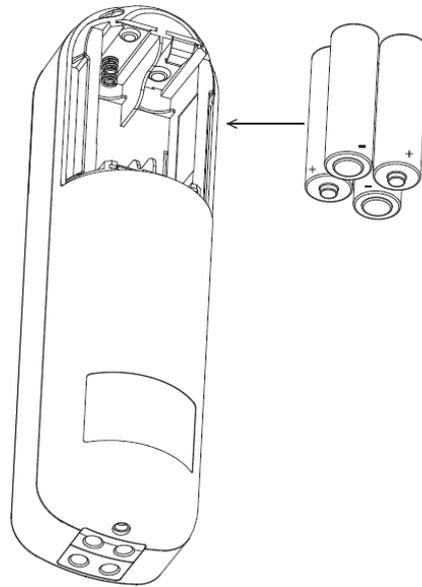

b) Uso com energia elétrica.

Verifique se o controle está SEM as pilhas. Para usar o massagador ligado na energia elétrica, seu massagador precisa estar sem pilhas. Conecte o plug no controle e conecte o adaptador na tomada. Esse produto é bivolt!

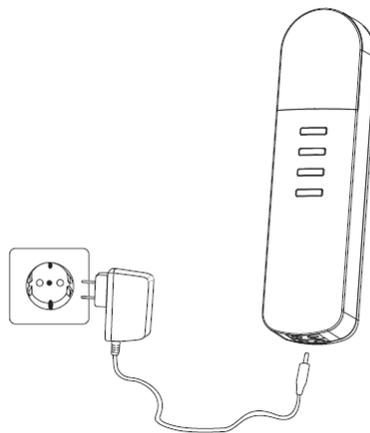

**A) Sugestão de Uso**  
**IMPORTANTE**

- Não solte o velcro do massagedor durante o uso, isso pode afetar as funções do produto. Faça isso apenas se sentir algum desconforto durante o uso.
- Verifique se as mangueiras de ar não estão dobradas durante o uso
- Não cubra o massagedor durante o uso
- Verifique se as mangueiras estão bem presas no controle
- Não fique em pé enquanto estiver usando o massagedor

#### **COMO VESTIR AS BOTAS**



Sugerimos que vista as botas sem utilizar meias ou calças cumpridas para evitar que a pressão de ar machuque as pernas e pés ou danifique o produto.


Na parte superior de cada bota, verifique na etiqueta, qual a bota correta para cada perna. R para direita e L para esquerda.

Para vestir as botas, coloque as pernas na horizontal e ajuste o velcro de forma que fique confortável.

Durante a massagem, mantenha as pernas na horizontal para ter uma melhor sensação de relaxamento.

Conecte as mangueiras de ar no controle e nas botas. Verifique se a mangueira está conectada na saída do controle R na bota R e na saída L na bota L.

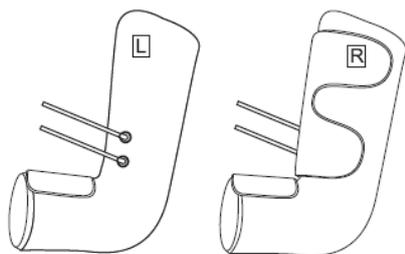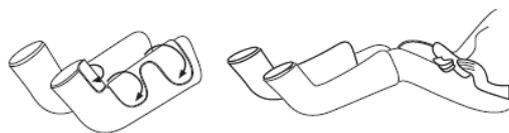

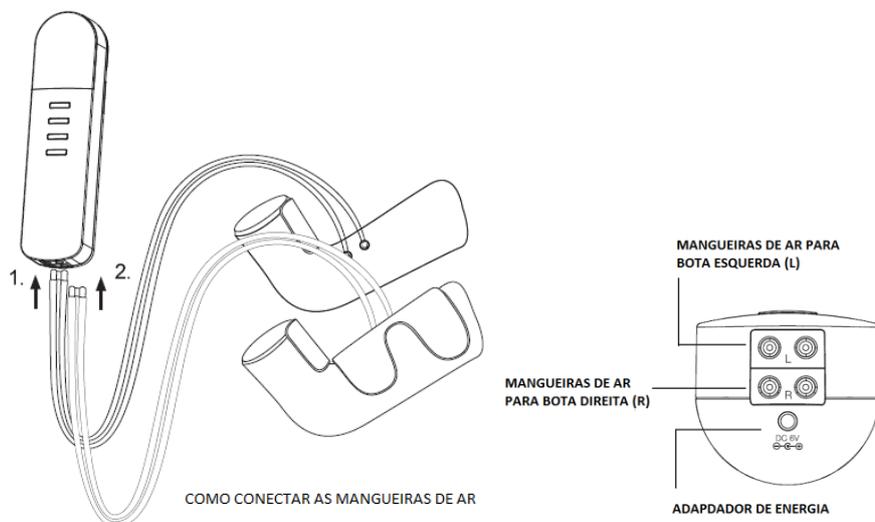

## COMO USAR O CONTROLE

**ON/OFF:** use o botão para iniciar a massagem. Ao ligar o massagador iniciará a massagem no modo 1 de massagem, com intensidade 2 e timer de 10 minutos. Aperte novamente o botão para desligar.

**TIMER:** aperte o botão para selecionar o tempo de massagem entre 5, 10 e 15. Após o terminar o período de massagem selecionado, o massagador desligará automaticamente.

Sugerimos que seja feita massagem de até 15 minutos. Após esse período você poderá sentir desconforto no local massageado.

**MODO DE MASSAGEM:** use esse botão para selecionar entre 3 tipos de massagem:

*Modo 1:* massagem de alta pressão rápida (pé esquerdo e panturrilha, pé direito e panturrilha juntos)

*Modo 2:* massagem de alta pressão lenta (pé esquerdo e panturrilha, pé direito e panturrilha juntos)


*Modo 3:* massagem de alta pressão lenta (pé esquerdo e panturrilha direita e depois pé direito e panturrilha esquerda)

**INTENSIDADE:** aperte para ajustar a intensidade da pressão de ar. Selecione 1 para suave, 2 para média e 3 para intensa.


Depois que este produto for usado e desligado, desconecte as mangueiras de ar do controle desinflar as botas. É necessário cerca de 1 minuto para todo ar sair. Em seguida, tire as botas e dobre-as para o próximo uso. Se este produto não for usado para o tempo de registro, retire as pilhas para evitar danos ao produto.

**4. DETALHES DO PRODUTO**


**BOTA ESQUERDA (L)**

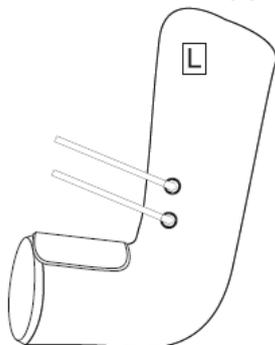

**BOTA DIREITA (R)**

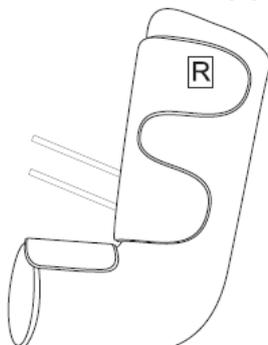

**MANGUEIRAS DE AR**

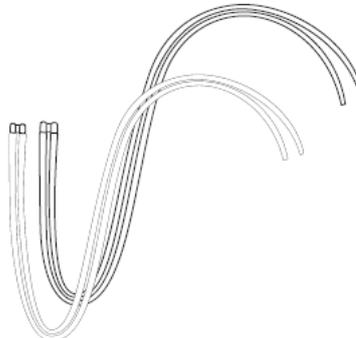

**CONTROLE**



**ADAPTADOR DE ENERGIA**



**BOLSA**

<b>FALHA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>O QUE FAZER</b>
Falha no produto	Confira se as pilhas estão colocadas corretamente	Instale as pilhas corretamente de acordo com o manual de instruções
	Confira se as pilhas estão carregadas	Substitua por pilhas novas
	Confira se o adaptador de energia está conectado corretamente	Conecte corretamente o adaptador
Falha nos air bags	Confira se as mangueiras de ar estão conectadas corretamente no controle	Conecte corretamente as mangueiras de ar.

---

## 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 32 x 14,5 x 19 cm

Peso: 1,52 kg

Frequência: 60 Hz

Alimentação: Bivolt ou 4 Pilhas AA

Garantia: 1 ano

## 6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688