



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

ASSENTO ULTRA MASSAGE

RM-AM2206A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR	3
4. DETALHES DO PRODUTO	5
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
6. TERMOS DE GARANTIA	6

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
 - Com marca-passo
 - Gestante
 - Flebite
 - Trombose
 - Doenças cardíacas
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA


Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano para a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) Sugestão de Uso – No carro

1. Coloque o massageador (1) sobre o banco do carro.
2. Puxe a cinta de fixação superior (2) do assento massageador por sobre o encosto de cabeça do banco do carro.
3. Prenda o assento massageador com cuidado usando as cintas de fixação.
4. Conecte o plugue de baixa tensão do adaptador 12 V para carro na entrada de alimentação do assento.
5. Conecte o adaptador 12 V para carro no acendedor de cigarros.

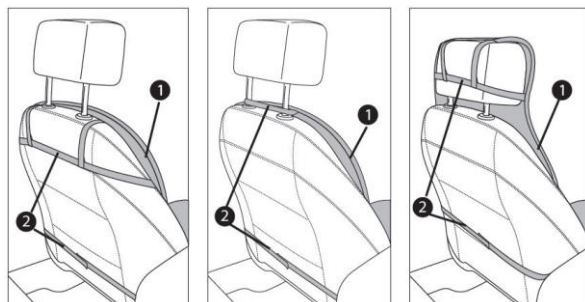

B) Sugestão de Uso – Poltrona ou sofá


1. Coloque o assento massageador sobre uma poltrona ou cadeira adequada
2. Prenda o assento massageador com cuidado usando as cintas de fixação.
3. Conecte o plugue de baixa tensão da fonte de alimentação na entrada de alimentação do assento massageador.
4. Conecte o plugue da fonte de alimentação na tomada.

C) Utilização

- Pressione o botão ON (Ligar) para ligar o assento massageador. O visor exibirá MODE (Modo).
- Há um total de 8 programas (MODE 1 - 8) disponíveis. Os programas variam em sua intensidade, áreas massageadas e também no ritmo utilizado.
- Pressione o botão MODE (Modo) (8) repetidamente para alternar entre os programas de massagem disponíveis.
- Para ativar a função aquecimento pressione o botão com o ícone de aquecimento para ligar e/ou desligar.

Obs.: Assim que o aparelho for ligado, o temporizador iniciará automaticamente a contagem regressiva de 30 minutos. O tempo restante (TIME) será exibido no visor.

4. DETALHES DO PRODUTO

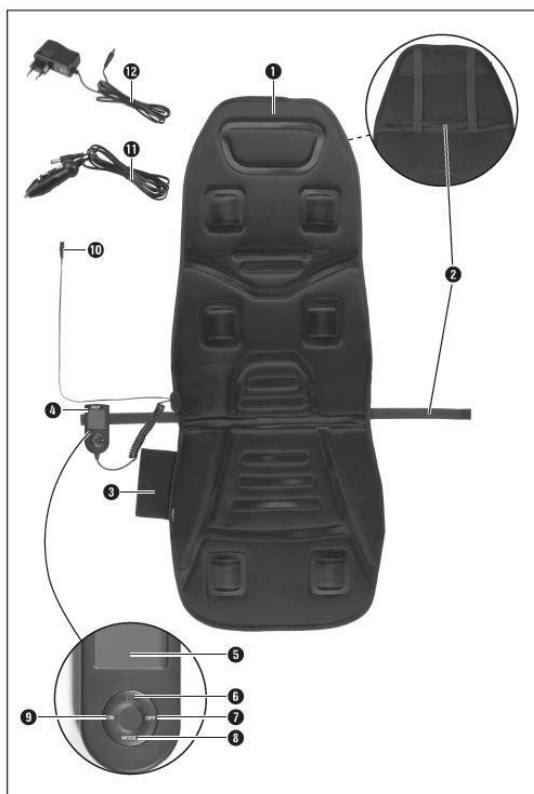

Controle

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) Assento Massageador | (2) Cintas de fixação |
| (3) Bolsa para armazenamento do controle | (4) Controle remoto |
| (5) Visor | (6) Aquecimento |
| (7) Botão OFF (Desligar) | (8) Botão MODE |
| (9) Botão ON (Ligar) | (10) Entrada de alimentação |
| (11) Adaptador V 12 para carro | (12) Fonte de alimentação |

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 70 x 3 x 44 cm

Peso: 1,15 kg

Potência: 12 W

Frequência: 60 Hz

Voltagem: Bivolt

Garantia: 12 meses

6. TERMOS DE GARANTIA

Estrutura:

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

Revestimento:

Os revestimentos usados nos estofados tem garantia de **90 dias**, em relação a: esgaçamento da costura, desfiados não causados por mau uso e desbotamento natural.

Esta garantia não abrange:

Enfraquecimento normal das fibras, causados pelo uso do produto; Achatamento; Pilling (bolinhas); Diferenças de tonalidade do revestimento entre as partes do produto, detectadas após a entrega; possíveis deformações ocasionadas pela lavagem do estofado e danos causados pelas impermeabilizações. Não esqueça: veludos e tipos aveludados (Suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.

Espumas:

A garantia para espumas é de **90 dias** em relação à perda de resistência. É importante saber que com o uso do estofado e o passar do tempo, é normal as espumas sofrerem uma pequena deformação.

Não esqueça: o amaciamento dos assentos e das almofadas são conseqüências naturais da utilização do produto. Algumas deformações são perfeitamente normais, não podendo ser confundidas com defeitos.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTA PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688