





Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

BOLSA RELAX THERMO MULTIUSO RM-BT3004A

BOLSA RELAX THERMO FLEX RM-BT3003A

BOLSA RELAX THERMO ADAPT RM-BT3001A

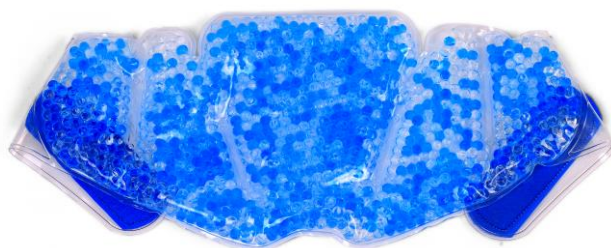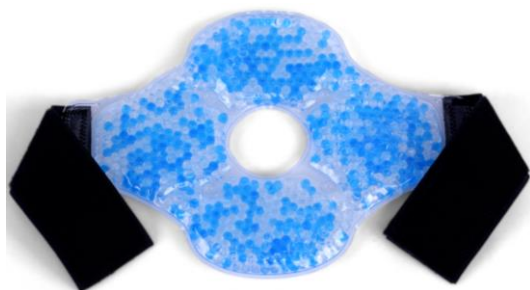

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	5
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
5. TERMOS DE GARANTIA.....	7

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Para evitar o dano ao produto não aqueça no fogão ou no forno.
- Pessoas com diabetes, doenças circulatórias, infecção, doenças de pele, sensibilidade ao calor ou frio devem consultar um médico antes de usar.
- Este produto pode causar queimaduras e congelamentos.
- Não utilize enquanto estiver dormindo.
- Se durante o uso tiver irritação, desconforto ou queimadura, remover o produto imediatamente.
- Não coloque peso extra sobre o produto.
- Não engula.
- Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o produto
- Não utilize o produto em pessoas com problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não coloque o produto diretamente no micro-ondas, siga as instruções em: B) Sugestão de Uso – Quente.
- Não use na pele, inflamada ou com erupções cutâneas
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
 - Flebite
 - Trombose
 - Diabetes
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do produto.

2. LIMPEZA

Para efetuar a limpeza, tenha a bolsa em temperatura ambiente.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) Sugestão de Uso - Frio

1. Coloque a bolsa térmica na geladeira ou freezer até que a temperatura desejada seja alcançada.
2. Em caso de sensibilidade, enrole a bolsa em um pano úmido, tecido ou toalha de papel. Então aplique no local para reduzir o inchaço, inflamação ou dor.
3. Não aplicar por mais de 20 minutos.

B) Sugestão de Uso - Quente

1. Dobre a bolsa térmica e enrole em uma toalha úmida.
2. Coloque no micro-ondas por 20 segundos na potência alta.
3. Para aumentar a temperatura, coloque no micro-ondas de 10 a 15 segundos de cada vez.

Importante: O tempo total de aquecimento não pode ser exceder 90 segundos. O aquecimento por mais tempo do que o recomendado pode causar danos ao micro-ondas e no produto.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões:

BOLSA RELAX THERMO FLEX RM-BT3003A: 123 x 14 cm

BOLSA RELAX THERMO ADAPT RM-BT3001A: 61 x 20 cm

BOLSA RELAX THERMO MULTIUSO RM-BT3004A: 57 x 15,5 cm

Garantia: 90 dias

BOLSA TÉRMICA RELAXMEDIC

Nome Técnico: Bolsas (de Água, Silicone, Gel, Gelo e Outras)

Modelos: RM-BT3004A - Bolsa Térmica Relax Thermo Multiuso; RM-BT3003A - Bolsa Térmica Relax Thermo Flex; RM-BT3001A - Bolsa Térmica Relax Thermo Adapt. Apresentação / Conteúdo: Caixa de transporte com 12 unidades de embalagem primária. Cada embalagem primária contém produto unitário.

Composição: Bolsa: Policloreto de vinila - PVC (sem ftalato); Micro esferas gelatinosas: água (70%)+ glicerina (25%) + poliacrilato de sódio (5%).

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.

Condições de Armazenamento, conservação, manipulação e precauções:

Ver Instruções de Uso.



Registro Anvisa Nº: 81017930001
Validade: Indeterminada
Data de Fabricação: 01/10/2017
Lote: Outubro/2017

Fabricado Por:



WUHAN PAKCARE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.
C-29, Jiahai Industry Park,
Panlongcheng Economic
Development Zone.Wuhan 430312 - China

Importado Por:



RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.
Rua Brigadeiro Galvão Nº 879 –
Barra Funda, São Paulo-SP
CEP: 01.151-000
CNPJ: 05.638.557/0001-76
TEL.: (11) 3393 3688
Site: <http://www.gruporelaxmedic.com.br/>

VICENTE CIONEY ANDREO JUNIOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRF/SP 14.498

5. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **03 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688