



# Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## BACK SHIATSU SEAT

RM-AS7177A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

## Índice

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	4
4. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO.....	5
5. DETALHES DO PRODUTO.....	5
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	6
7. TERMOS DE GARANTIA.....	6

### **Apresentação:**

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

## **1. CUIDADOS**

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas

ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;

- Não use em temperaturas acima de 40°C.
- Não use nem repouse sobre o produto se estiver dirigindo um veículo
- Não use o produto se a capa de tecido estiver rasgada.
- Não insira nenhum objeto ou material inflamável dentro do produto, isto poderá provocar choque elétrico ou risco de incêndios.
- O massageador não deverá ser usado no chão ou na cama.
- A duração sugerida de cada sessão é de 15 minutos, este produto não tem fins terapêuticos.
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

**IMPORTANTE:**

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
  - Gravidez
  - Com marca-passo
  - Flebite
  - Trombose
  - Doenças cardíacas
  - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

## **2. LIMPEZA**


Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

### 3. MODO DE USAR


#### A) PREPARAÇÃO ANTES DO USO

1. O Back Shiatsu Seat vem com um parafuso localizado no encosto para proteção do mecanismo massageador durante o transporte.
2. Use a chave Allen, fornecida com o produto, para remover o parafuso e inserir o plugue preto fornecido na abertura.

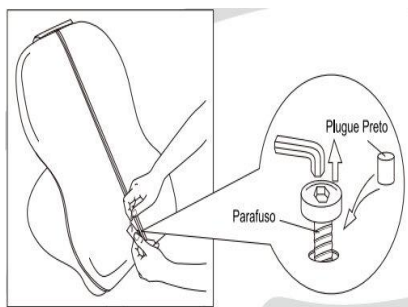

#### B) MONTAGEM

1. O massageador vem com uma fita que permite ao usuário fixá-lo à maioria das cadeiras.
2. Coloque o produto em uma cadeira, passe a fita ao redor do encosto da cadeira e prenda as duas pontas com o uso do velcro.

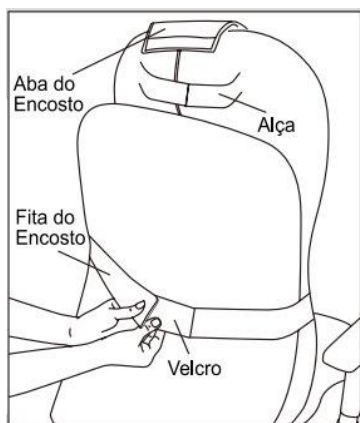


#### C) OPERAÇÃO

1. Ligue o plugue na tomada.
2. Pressione o botão "Power" (liga/desliga) do controle remoto para ligar o produto (vide figura 2).
3. Escolha uma das massagens do controle remoto descritas na figura 2.
4. Para ativar a função aquecimento pressione o botão "Aquecimento" em seu controle remoto.
5. Para parar todas as operações pressione o botão "Power" (liga/desliga) no controle remoto. O aparelho irá desligar.

#### 4. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO


1. Mantenha o produto limpo e distante de locais com alta umidade.
2. Se não for utilizar o massageador por um longo período, cubra-o com uma capa para evitar poeira.
3. Não guarde sob luz direta do sol ou em locais de altas temperaturas.
4. Limpe o controle remoto apenas com um pano seco.
5. Antes de limpar seu Assento, verifique se o produto foi desligado e o plugue removido da tomada.

#### 5. DETALHES DO PRODUTO

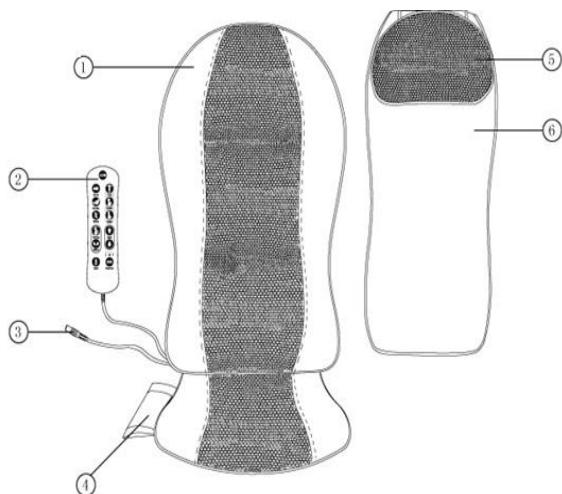

1. Unidade Principal
2. Controle Remoto
3. Plugue do cabo adaptador
4. Bolso do controle remoto
5. Almofada removível
6. Aba do encosto removível

1. Power (Ligar/Desligar)
2. Massagem Rápida
3. Massagem em todas costas
4. Massagem Shiatsu
5. Massagem na parte Superior
6. Massagem Rítmica
7. Massagem na Lombar
8. Massagem Circulante
9. Massagem localizada (cima)
10. Ajuste da largura
11. Massagem Localizada (baixo)
12. Aquecimento
13. Massagem Vibratória

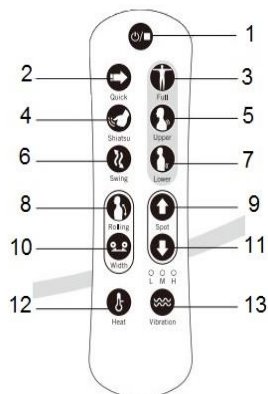

## 6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 39 x 42 x 68 cm

Potência: 42 W

Frequência: 60 Hz

Voltagem: Bivolt

Peso: 5kg

Garantia: 1 ano

## 7. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

---

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688